


GEBR

ZORGTELEFOON

PRINCESS

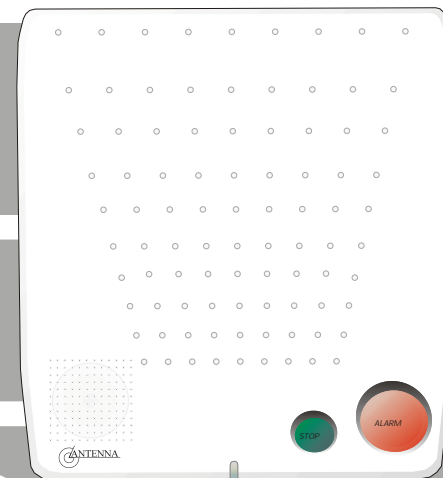

Uw Antenna leverancier:



DE PRINCESS




Met de Princess zorgtelefoon van Antenna heeft u de mogelijkheid om, in een noodgeval, 24 uur per dag een hulpcentrale te bereiken. Wanneer een alarm wordt gemaakt belt de Princess automatisch de ingeprogrammeerde hulpcentrale en geeft deze de informatie over wie het alarm maakt heeft en waarom.

In het geval van een hulp-oproep wordt er een spreek-luister verbinding geopend welke u in staat stelt met de bediener van de alarmcentrale te spreken.


Basis-set bestaat uit:

Carephone
Handzender
Lichtnet adapter
Telefoon snoer met plug
Gebruikers handleiding

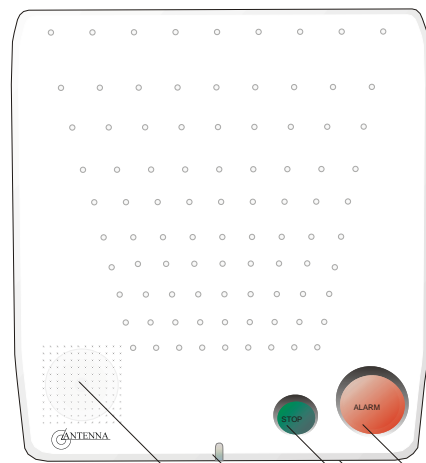

Alarm knop
LED-indicator

ALARM knop
Mikrofoon
STOP knop
LED-indicator
Luidspreker

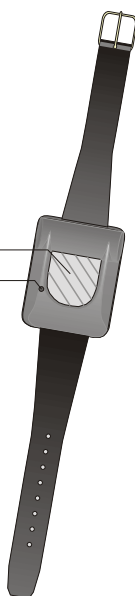

DE HANDZENDER

Uw handzender is een draadloze alarm zender waarmee u een hulp-oproep kunt maken.

Wanneer de handzender's drukknop wordt ingedrukt vertelt deze de Princess automatisch dat hij een hulpcentrale moet Bellen.

De handzender is klein en kan eenvoudig gedragen worden om uw pols of om uw nek. Geadviseerd wordt hem thuis altijd bij u te dragen.

ONTVANGEN VAN ALARMEN OP EEN TELEFOON



De meeste hulp-oproepen gaan direct naar een hulpcentrale. Normaal gesproken is dit de veiligste manier omdat deze 24 uur per dag bemant is.

Het is echter ook mogelijk een alarm te maken naar familie of kennissen.

Om alarmen te ontvangen heeft u een gewone telefoon met een toonkiezer en druktoetsen (inclusief de * en # toetsen) nodig.

1 Wanneer u de telefoon opneemt hoort u elke seconde een pieptoon. U neemt de alarm oproep aan door een '4' in te toetsen.

2a Wanneer het een hulp-oproep betreft wordt automatisch een spreek-luister verbinding geopend. U kunt direct communiceren met de persoon die het alarm heeft gemaakt.

U kunt zelf de spreekrichting bepalen. Wanneer u de '7' intoetst kunt u luisteren, wanneer u de '8' intoetst kunt u spreken.

Wanneer de Princess is voorzien van een duplex kaart hoeft niet van spreekrichting te worden veranderd. Dit gebeurt dan automatisch.

Dire minuten nadat voor het laatst een toets is ingedrukt wordt de verbinding automatisch verbroken.

Door de '4' in te toetsen en verlengd u de verbinding telkens met 3 minuten.

2b Wanneer het een technisch alarm betreft hoort u alleen pieptonen. Deze hebben de volgende betekenis:

Aant. pieptonen Soort alarm _____

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Zender batterij leeg |
| 2 | Accu Princess leeg |
| 4 | Netspannings uitval |
| 5 | Netspanning normaal |

3 Wanneer u de uitgang van de Princess wilt bedienen toetst u een '9'.

4 Om een alarm af te sluiten toetst u een '0' en legt u de hoorn op de haak.

De goederen, geproduceerd door Antenna, zijn conform de eisen volgens de Europese richtlijn 1999/5/EC.
Een kopie van de goedkeuringsverklaring is te vinden op www.antenna.se.

TESTEN EN PROGRAMMEREN VAN DE HANDZENDER



Uw zorgtelefoon is uitgerust met de mogelijkheid om het bereik van uw handzender te controleren zonder daarbij een alarm te maken. U kunt ook nieuwe zenders toekennen en oude verwijderen. In totaal kunnen 4 verschillende zenders in de zorgtelefoon worden geprogrammeerd. Deze hebben de volgende standaard functies:

- 1Hulp-oproep
- 2Hulp-oproep
- 3Nood-oproep
- 4Rookalarm

Neemt u contact op met uw leverancier als u deze functies wilt veranderen.

Doe als volgt:

Houdt de groene STOP knop ingedrukt terwijl u met de OFF/ON knop de zorgtelefoon aan zet (ON). Laat na 2 seconden de STOP knop weer los. De zorgtelefoon bevindt zich nu in de test/programmeermodus. De LED-indicator knippert nu afwisselend rood en groen. Kies nu voor optie A, B of C.

Optie A - Test zenderbereik

Druk op verschillende plaatsen in uw woning op de handzender. Als het signaal van de handzender door de zorgtelefoon wordt herkend zal deze piepen. Ga na of het bereik voldoende is.

Optie B - Installeren handzender

1 Kies het type zender dat u wilt installeren door 1 - 4 keer op de rode ALARM knop te drukken. De zorgtelefoon geeft aan welke positie is geselecteerd door middel van 1 - 4 pieptonen.

2 Activeer de handzender welke u wilt installeren. Als de zorgtelefoon de zender accepteert begint de LED-indicator groen te branden en het apparaat continue te piepen. Begint de LED-indicator rood te branden dan is de zender reeds geïnstalleerd.

3 Sla de zender op in het geheugen door 1 maal op de rode ALARM knop te drukken.

Optie C - Wissen van alle zenders

1 Houdt de rode ALARM knop langer dan 3 seconden ingedrukt. De LED-indicator wordt groen en het apparaat piept continue.

2 Druk nu 1 maal op de rode ALARM knop om de zenders te wissen.

Test/programmeer modus afsluiten

Druk 1 maal op de STOP knop om de test/programmeer modus te verlaten. De zorgtelefoon is nu weer gereed voor normaal gebruik.

Belangrijk! Na installatie van een nieuwe handzender moet u altijd een alarm maken om de nieuwe zender te testen.


INSTALLATIE



Afb.1

1 Programmeren van de zorgtelefoon is niet nodig. Uw leverancier heeft dit reeds voor u gedaan. Plaats de zorgtelefoon in de buurt van een lichtnet-en PTT wandcontactdoos. De princess is te gebruiken als tafelmodel en als wandmodel (de afstand tussen de schroefgaten bedraagt 135 mm).

2 Plaats de telefoonsteker in de PTT wandcontactdoos. Sluit het telefoonsnoer aan op de telefoonsteker en op de aansluiting 'TELE' aan de achterzijde van de zorgtelefoon. Steek de telefoonsteker van uw normale telefoon in de telefoonsteker van de zorgtelefoon (aan de bovenzijde, zie afb.2).

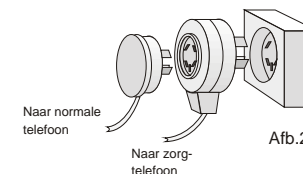

Afb.2

3 Steek de voedingsplug van de lichtnetadapter in de aansluiting 'POWER' aan de achterzijde van de zorgtelefoon. Plaats vervolgens de lichtnetadapter in een stopcontact.

4 De antenna draad aan de achterzijde van de zorgtelefoon dient vrij te liggen of te hangen. De microfoonopening aan de voorzijde van het apparaat mag niet afgedekt worden.

5 Zet de zorgtelefoon aan door de aan/uit schakelaar in de stand 'ON' te zetten (deze schakelaar moet als het apparaat buiten gebruik is altijd in de stand 'OFF' staan). Als de groene LED-indicator gaat branden is de zorgtelefoon klaar voor gebruik.

6 Maak ter controle altijd een testalarm door de handzender te activeren. Als u verbinding krijgt met de hulpcentrale dient u meteen contact op te nemen met uw leverancier.

geen

DE WERKING



Een oproep maken

U maakt een hulp-oproep door de rode ALARM knop op de zorgtelefoon of de knop op de handzender in te drukken. Na het maken van een oproep begint de LED-indicator rood te knipperen en brengt de zorgtelefoon een pulserende pieptoon voort. Na een vertraginstijd van 10 seconden belt de zorgtelefoon automatisch een hulpcentrale. Wanneer de verbinding tot stand komt zal de rode LED-indicator constant branden en kunt u spreken met de persoon welke de hulpcentrale bemant. Deze kan u verder helpen.

Wanneer de hulpcentrale uw hulp-oproep behandeld heeft zal deze de oproep afstellen waarna de verbinding wordt verbroken. Tijdens het verbreken hoort u een pieptoon van circa 1 seconde waarna de zorgtelefoon in rust zal komen. De LED-indicator zal weer groen gaan branden.

In het geval dat de zorgtelefoon de hulpcentrale niet heeft kunnen bereiken zal deze dit blijven proberen totdat de verbinding tot stand is gekomen. Wanneer uw normale telefoon in gebruik is en een alarm wordt gemaakt zal de zorgtelefoon automatisch de telefoonverbinding verbreken en de telefoonlijn overnemen. Hierdoor heeft een alarm altijd een hogere prioriteit dan een telefoongesprek.

Een alarm afbreken

Als u per ongeluk een alarm maakt, kunt u deze afbreken door 1 maal op de groene STOP knop te drukken. Een aantal automatische alarmen, zoals een batterij alarm, kunnen niet worden afgebroken.

Bewaking van de telefoonlijn

Mocht er iets mis zijn met uw telefoonlijn dan wordt dit gedetecteerd door uw zorgtelefoon. U zal om de tweede een pieptoon horen en de LED-indicator zal langzaam rood knipperen. Het piepen kan worden uitgezet door 1 maal op de groene STOP knop te drukken.

Netspanningsuitval

Bij netspanningsuitval schakelt de zorgtelefoon automatisch over op zijn accu. Het toestel kan 5 dagen op deze accu blijven werken. Zodra de netspanning wegvalt geeft de Princess een snel pulserende pieptoon en de LED-indicator begint rood te knipperen.

Wanneer de netspanningsuitval langer duurt dan 1 uur zal de Princess dit door middel van een automatische alarmoproep melden aan de hulpcentrale. Als dit gebeurt zal ook een alarmoproep naar de hulpcentrale gaan wanneer de netspanning weer aanwezig is.

Wanneer nog maar 20% van de accu capaciteit aanwezig is zal de Princess een alarmoproep maken naar de hulpcentrale.

Nadat de netspanning weer aanwezig is zal de accu automatisch worden opgeladen. Als de zorgtelefoon langdurig op de accu heeft gewerkt kan het tot 24 uur duren totdat de accu weer volledig is opgeladen.

Batterij alarm van de handzender

Iedere keer dat u op de knop van de handzender drukt wordt de batterij van de handzender gecontroleerd. Als u de handzender indrukt moet de LED-indicator op de handzender constant branden. Is de batterij van de handzender echter leeg aan het raken dan zal de LED-indicator knipperen. Tegelijkertijd zal de Princess een alarmoproep naar de hulpcentrale maken waarbij wordt aangegeven dat de batterij van uw handzender leeg is.

Wanneer er niets gebeurt na het indrukken van de handzender zult u een alarm moeten maken met de ALARM knop op de zorgtelefoon. In dit geval moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw leverancier.

Rook alarm

Uw Princess zorgtelefoon kan worden uitgerust met een draadloze rookmelder (zender no.4). Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw leverancier.

LED-indicator zorgtelefoon

Uw Princess zorgtelefoon heeft een LED-indicator welke bepaalde meldingen als volgt aangeeft:

Normaal in bedrijf Constant groen
Oproep Knippert rood-snel
Communicatie open Knippert rood-kort
Fout in telefoonlijn Knippert rood-langzaam
Niets geprogrammeerd Knippert rood/groen-langzaam
Test/programmeer modus Knippert rood/groen-snel
Welzijnsmelding uitgeschakeld Knippert groen-langzaam
Aanwezigheidsmelding Knippert groen-snel

Overval-alarm

De handzender kan ook dienst doen als overval-alarm (zender no.3). Als u een alarm maakt zal de Princess geen geluid maken tijdens het verbinding maken met de hulpcentrale. De bediener van de hulpcentrale kan via de zorgtelefoon horen wat er gebeurt in uw woning.

Extra's

Uw zorgtelefoon heeft extra functies zoals een test alarm, welzijns melding en aanwezigheids melding. Optioneel kan de Princess worden voorzien van een I/O kaart waardoor bedrade alarmgevers zoals een trek-schakelaar kunnen worden aangesloten. Bovengenoemde functies zijn slechts een paar voorbeelden waarmee uw Princess zorgtelefoon kan worden uitgebreid. Voor meer informatie over uitbreidingen kunt u contact opnemen met uw leverancier.

